



I sistemi biologici BIO-CHECK sono progettati allo scopo di verificare l'efficacia del ciclo di sterilizzazione utilizzato. I diversi tipi di indicatori biologici BIO-CHECK sono indicati per le varie tipologie di processi di sterilizzazione: vapore, plasma, ETO, aria calda e formaldeide.

Gli indicatori biologici BIO-CHECK contengono spore batteriche inoculate su un supporto cartaceo ed inserite in un piccolo tubo di materiale plastico contenente un'ampolla di vetro riempita con uno speciale liquido. Nel tappo degli indicatori biologici BIO-CHECK è presente un filtro che permette l'ingresso dell'agente sterilizzante. All'interno di ogni confezione di indicatori biologici BIO-CHECK è presente il relativo certificato.

INDICATORI BIOLOGICI: "BIO-CHECK" INDICATORE BIOLOGICO PER VAPORE

- Indicatore biologico per il monitoraggio dei processi di sterilizzazione a vapore.
- Spora utilizzata: Geobacillus Stearothermophilus.

REF. BIO-CHECK 98.B4



REF. BIO-CHECK 98.B1



REF. BIO-CHECK 98.B5



INDICATORI BIOLOGICI: "BIO-CHECK" INDICATORE BIOLOGICO PER VAPORE

- Pacco biologico monouso per autoclave a vapore contenente:
 - N.1 indicatore biologico.
 - Spora utilizzata: Geobacillus Stearothermophilus.
 - N. 1 scheda con indicatore di processo per la registrazione dati interna al pacco.
 - N. 1 barriera composta da fogli di carta pura cellulosa.
 - Involucro in cartoncino con indicatore di processo.
 - Istruzioni d'uso.
- Il BIO-PACK è un prodotto sicuro ed affidabile per la validazione del processo di sterilizzazione a vapore.

KIT PACK
 con
 BIO-CHECK 98.B4

KIT PACK
 con
 BIO-CHECK 98.B1

KIT PACK
 con
 BIO-CHECK 98.B5

BIO-CHECK - INDICATORI BIOLOGICI

REF.	LETTURA FINALE	CONFEZ.
BIO-CHECK 98.B4	dopo 24 ore di incubazione	100 pz/box
BIO-CHECK 98.B1	dopo 1 ora di incubazione	50 pz/box
BIO-CHECK 98.B5	dopo 3 ore di incubazione	50 pz/box
BIO-CHECK 98.B4/10	dopo 24 ore di incubazione	10 pz/box
BIO-CHECK 98.B4/20	dopo 24 ore di incubazione	20 pz/box


REF. BIO-PACK WITH
 BIO-CHECK 98.B4 OPPURE
 BIO-CHECK 98.B1 OPPURE
 BIO-CHECK 98.B5



INTERNO DEL BIO-PACK
 CON INDICATORE
 BIOLOGICO



SCHEDA DI
 REGISTRAZIONE INTERNA
 DEL BIO-PACK

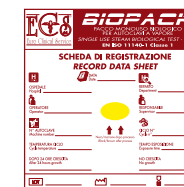

BIO-PACK - BIOLOGICAL PACK

REF.	KIT	LOTTO MIN.
BIO-PACK 6F	pacco con n.1 fiala interna	20 pz
BIO-PACK 6F 1/2	pacco con n.1 fiala interna e n.1 di riferimento ogni 2 pacchi	20 pz
BIO-PACK 6F 1/1	pacco con n.1 fiala interna e n.1 di riferimento ogni 1 pacco	20 pz
BIO-PACK 1HRAPID 6F	pacco con n.1 fiala interna	20 pz
BIO-PACK 1HRAPID 6F 1/2	pacco con n.1 fiala interna e n.1 di riferimento ogni 2 pacchi	20 pz
BIO-PACK 1HRAPID 6F 1/1	pacco con n.1 fiala interna e n.1 di riferimento ogni 1 pacco	20 pz
BIO-PACK 1HRAPID 6F VC	pacco con n.1 fiala interna con vapor C	20 pz
BIO-PACK 3HRAPID 6F	pacco con n.1 fiala interna	20 pz
BIO-PACK 3HRAPID 6F 1/2	pacco con n.1 fiala interna e n.1 di riferimento ogni 2 pacchi	20 pz
BIO-PACK 3HRAPID 6F 1/1	pacco con n.1 fiala interna e n.1 di riferimento ogni 1 pacco	20 pz
BIO-PACK 3HRAPID 6F VC	pacco con n.1 fiala interna con vapor C	20 pz

INDICATORI BIOLOGICI: "BIO-CHECK 98.B6"

INDICATORE BIOLOGICO PER VH_2O_2

- Indicatore biologico ideale per la sterilizzazione con perossido di idrogeno VH_2O_2 .
- Spora utilizzata: Geobacillus Stearothermophilus.
- La lettura finale del risultato dell'indicatore biologico viene effettuata a 24 ore di incubazione.
- Confezionamento: 100 pz.

REF. BIO-CHECK 98.B6



INDICATORI BIOLOGICI: "BIO-CHECK 98.B2"

INDICATORE BIOLOGICO PER EO

- Indicatore biologico idoneo per la sterilizzazione a EO
- Spora utilizzata: Geobacillus Atrophaeus
- La lettura finale del risultato dell'indicatore biologico viene effettuata a 48 ore di incubazione.
- Confezionamento: 100 pz.

REF. BIO-CHECK 98.B2



INDICATORI BIOLOGICI: "BIO-CHECK 98.B7"

INDICATORE BIOLOGICO PER FORMALDEIDE

- Indicatore biologico idoneo per la sterilizzazione a formaldeide
- Spora utilizzata: Geobacillus Stearothermophilus.
- La lettura finale del risultato dell'indicatore biologico viene effettuata a 48 ore di incubazione.
- Confezionamento: 100 pz.

REF. BIO-CHECK 98.B7



INDICATORI BIOLOGICI RAPIDI: "BIO-CHECK 98.B9"

INDICATORE BIOLOGICO RAPIDO PER VH_2O_2

- Indicatore biologico ideale per la validazione di processi di sterilizzazione con perossido di idrogeno VH_2O_2 .
- Spora utilizzata: Geobacillus Stearothermophilus.
- Lettura rapida a 2 ore di incubazione.
- Confezionamento: 50 pz/box.

REF. BIO-CHECK 98.B9



INDICATORI BIOLOGICI RAPIDI: "BIO-CHECK 98.B3"

INDICATORE BIOLOGICO RAPIDO PER EO

- Indicatore biologico idoneo per la validazioni di processi di sterilizzazione a EO
- Spora utilizzata: Geobacillus Atrophaeus
- Lettura rapida a 4 ore di incubazione.
- Confezionamento: 50 pz/box.

REF. BIO-CHECK 98.B3



ECS si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, i prodotti descritti in questo catalogo per motivi tecnici e commerciali. I colori potrebbero non corrispondere alla realtà.

Ed. 02 - 03/2018 - ECS srl



E.C.S. SRL - EURO CLINICAL SERVICE
VIA 1° MAGGIO 18/22
23881 AIRUNO (LC) - ITALY

tel +39 0341 681602
fax +39 0341 605485

E-mail
appalti@ecssrl.com
export@ecssrl.com
info@ecssrl.com

Website
www.ecssrl.com

